

复合荧光素 PerCP-Cy5.5

目录号 规格

SFP012-001 1mg

SFP012-010 10mg

相关介绍

PerCP-Cy5.5 复合荧光素是一种可由 488nm 激光激发的串联染料。将多甲藻黄素-叶绿素复合物与有机荧光染料 Cy5.5 进行化学偶联, PerCP-Cy5.5 较 PerCP 荧光强度高, 更适用于低表达物质的分析检测。

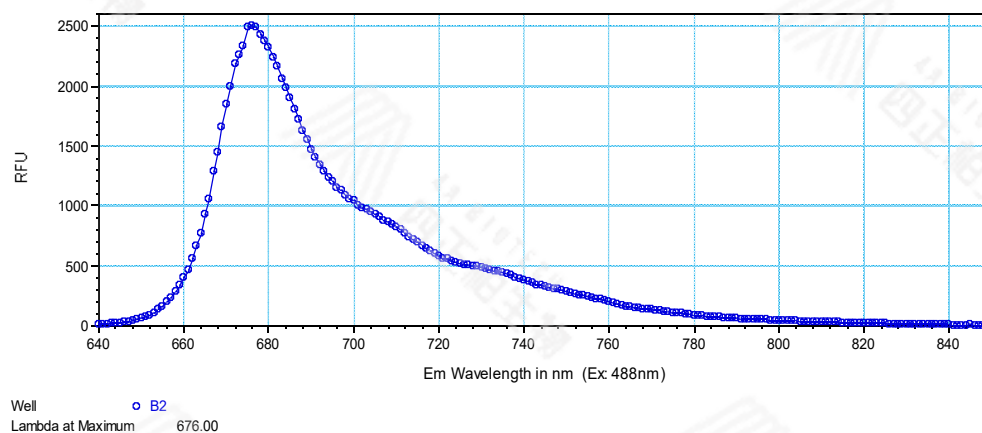
产品性质

形态: 棕色溶液

分子量: ~35000Da

激发光 (Ex): 488nm

发射光 (Em): 675nm

缓冲体系: PBS, 10mM NaN_3 , pH7.0

储存条件

2-8℃避光

有效期

2-8℃避光可保存 6 个月

注意事项

- 本品为溶液状态, 切勿进行冷冻
- 避免将本品长期置于光照下, 使用时应尽量全程避光
- 使用本品时建议穿实验服和佩戴一次性手套